



AZ Voorkepen

algemeen ziekenhuis
emmaüs



Infusor

Toediening chemotherapie met infuuspomp

Inhoud

1. Wat is een infusorsysteem?.....	4
2. Hoe ziet een infusor [®] eruit?.....	5
3. Hoe werkt het infusorsysteem?.....	5
4. Hoe volg ik het verloop van de infusie?.....	5
5. Hoe kan ik de infusor [®] dragen?.....	6
6. Waar thuis op letten tijdens je behandeling met een infusor [®] ?.....	6
7. Mogelijke problemen bij gebruik van een infusor [®]	7
8. Hoe wordt een infusor [®] afgesloten?.....	8
9. Contactgegevens bij vragen.....	9
10. Persoonlijke notities.....	9

Sommige behandelingen worden toegediend met behulp van een infusor[®], ook wel infuuspomp genaamd. In deze folder wordt uitgelegd wat een infusor[®] is, hoe een behandeling verloopt, waarop je thuis moet letten en wat je kan doen bij problemen. Tenslotte vind je ook thuisverpleegkundige informatie over het afsluiten van een infusor[®] in deze folder.


Graag duiden wij je op het belang van goede informatie voorafgaand aan toediening van chemotherapie met een infuuspomp. Wij raden je dan ook ten zeerste aan deze folder grondig door te nemen. Heb je nog bijkomende vragen, aarzel dan niet om je behandelende arts aan te spreken of neem contact op met de desbetreffende dienst (zie contactgegevens verder in de folder).

1. Wat is een infusorsysteem?

Een infusorsysteem is een draagbaar medicatiesysteem dat ontworpen is voor continue, langzame toediening van medicatie in je bloedbaan.

Het is ontworpen om je behandeling zo aangenaam mogelijk te maken, zodat het mogelijk is je medicatie toegediend te krijgen zonder je dagelijkse activiteiten te moeten onderbreken.

2. Hoe ziet een infusor® eruit?

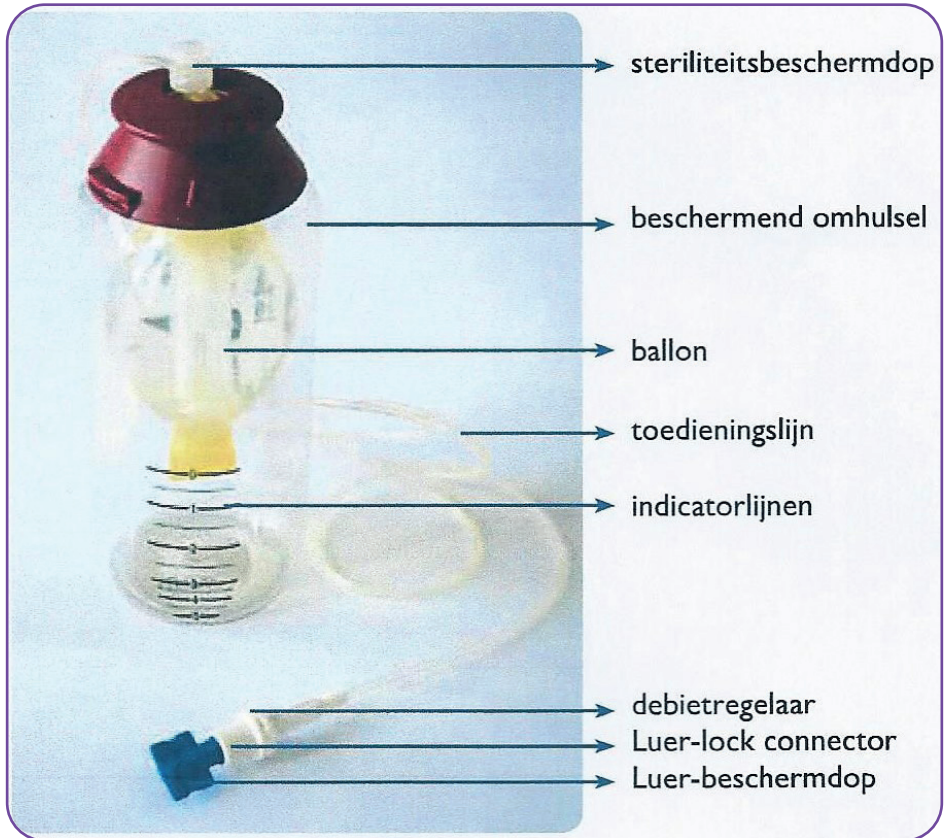


3. Hoe werkt het infusorsysteem?

Het ballonreservoir duwt de medicatie via de toedieningslijn en de katheter in je bloedbaan. De debietregelaar controleert de infusiesnelheid van de medicatie. Je behandelend geneesheer zal de infusor® kiezen met een infuussnelheid die het best aansluit bij je behandeling.

4. Hoe volg ik het verloop van de infusie?

Met behulp van indicatorlijnen op de buitenkant van de infusor®, kan je het verloop van de infusie volgen. je behandelend arts zal je meedelen hoelang de infusie ongeveer zal duren. De infusie is pas voltooid als het ballonreservoir leeg is. Je ziet het aan de hand van de leegindicator, dit zijn

acht uitsteeksels aan de binnenkant van de ballon die enkel zichtbaar zijn indien de ballon volledig leeg is.

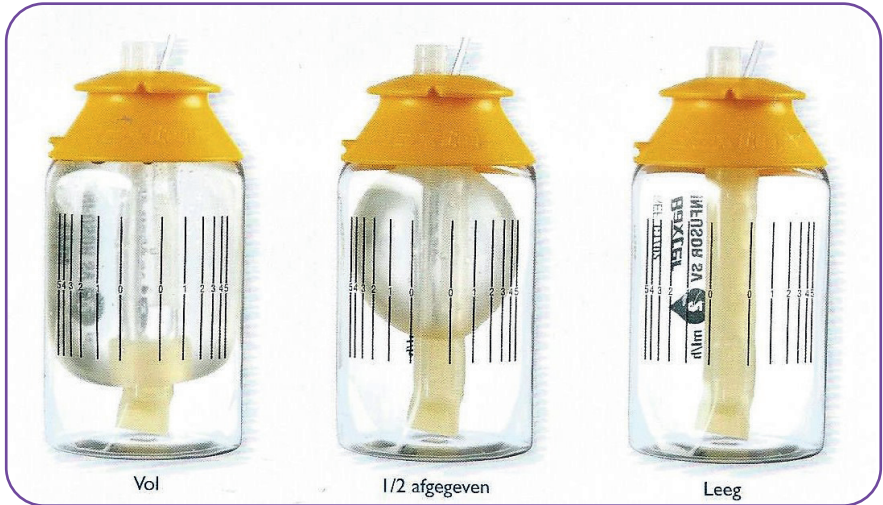

5. Hoe kan ik de infusor® dragen?

In het ziekenhuis krijg je een draagtasje waarin je je infusor® kan bewaren. Je kan het tasje rond de hals of rond de lenden bevestigen. Je kan het tasje ook in een binnenzak of grote broekzak opbergen. Zo voorkom je dat de infuus pomp op de grond valt.



6. Waar thuis op letten tijdens je behandeling met een infusor®?

- Let erop dat de leiding mooi opgerold is en dat ze nergens blijft achter haken (bv. deurklink, stoel ...). Dit voorkomt trekkracht op de leiding of de poortkatheternaald. Door de grote trekkracht kan de leiding beschadigd raken en kan de naald uit de poortkatheter komen. Zo kan er vloeistof lekken, die irriterend kan werken op huid en slijmvliezen.
- Zorg ervoor dat het hoogteverschil tussen de infusor® en de katheter ongeveer hetzelfde blijft. Dat zorgt ervoor dat de vloeistof in de infusor® continu aan dezelfde snelheid loopt.

- Zorg ervoor dat de debietregelaar goed op je huid bevestigd blijft. De debietregelaar van de infusor® (zie afbeelding "hoe ziet een infusor® eruit") wordt aangedreven door je lichaamstemperatuur. De verpleegkundige zal in het ziekenhuis deze op je huid vastkleven.
- De infusor® mag niet worden ondergedompeld of in contact komen met een waterstraal. Plaats de infusor® in een plastic zak of op een vast oppervlak buiten de douche of bad.
- Je kan de infusor® veilig gebruiken als er huisdieren in de buurt zijn, maar zorg er wel voor dat je huisdier er niet op kan bijten of ermee kan spelen.
- De infusor® kan gebruikt worden tijdens dagelijkse activiteiten/sporten zolang de infusor® maar op de plaats is waar het op kamertemperatuur kan blijven en niet gedurende langere periode wordt blootgesteld aan extreme warme of lage temperaturen. Bescherm de infusor® tegen direct zonlicht.

7. Mogelijke problemen bij gebruik van een infusor®

- De klemmen staan niet open waardoor de inhoud niet wordt geledigd; klemmen terug openzetten.
- Bloed in de leiding waardoor leiding en poortkatheter kunnen verstopen; **contact opnemen met ziekenhuis of de thuisverpleegkundige.**
- Lekkage door losgekomen poortkatheternaald; klemmen dichtzetten en **onmiddellijk contact opnemen met het ziekenhuis.** Eventuele besmette oppervlakten en kledij die bevuild zijn met cytostatica overvloedig spoelen of wassen met water. Gebruik steeds wegwerphandschoenen.
- Opzwellling, pijn, branderig gevoel rond de poortkatheter; ijszak op de huid aanbrengen en **onmiddellijk contact opnemen met het ziekenhuis.**
- Pijn, branderig gevoel, natte vlek op huid; ijszak aanbrengen en **onmiddellijk contact opnemen met het ziekenhuis.**


8. Hoe wordt een infusor® afgesloten?

Wanneer het reservoir leeg is, kan dit **in het ziekenhuis of door de thuisverpleegkundige** worden afgesloten. Je mag dit nooit zelf doen!

Info voor thuisverpleegkundige

De poortkatheter wordt gespoeld met 10 cc Natriumchloride 0,9 %. Bij ons in het ziekenhuis worden de Surecan Safety II naalden gebruikt. Om deze te verwijderen plaats je duim- en wijsvinger of wijs- en middenvinger op het plaatje van de naald en houd je het plaatje tegen de huid van de patiënt.

Neem met de andere hand de vleugeltjes van de naald vast. (afbeelding A) Trek de vleugeltjes naar boven. Het plaatje blijft tegen de huid van de patiënt. Op een bepaald moment hoort je een 'klik' en zal er een groen bolletje verschijnen op het plaatje van de naald. Dit wil zeggen dat het veiligheidsmechanisme gewerkt heeft. (afbeelding B) Je kan de verwijderde naald gewoon in de naaldcontainer werpen.

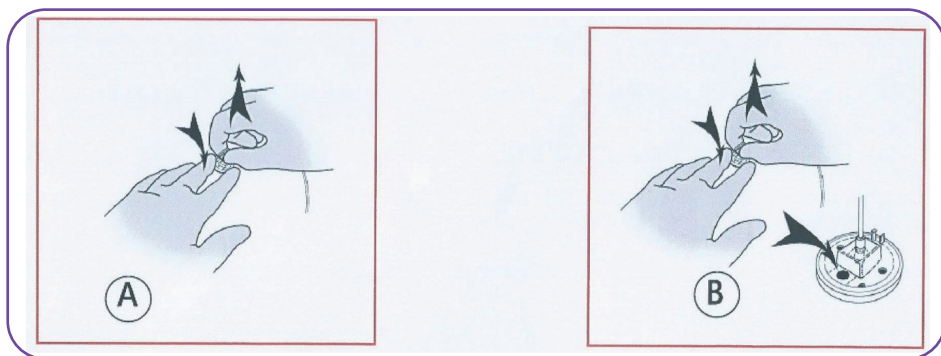

Het afval wordt via speciale containers verwijderd. Indien de thuisverpleegkundige de infusor® afsluit, kan het afval in een plastic zak worden verzameld en de zak worden dichtgeknoopt. Het afval kan dan bij de volgende behandeling worden meegebracht. De infusor® wordt maar éénmalig gebruikt.

9. Contactgegevens bij vragen

Heb je bij het doorlezen van de folder toch nog bijkomende vragen? Stel ze dan gerust! Je kan je behandelende arts of verpleegkundige contacteren via:

Daghospitaal oncologie

- 03 380 20 14
- daghospitaal.oncologie@emmaus.be
- maandag t.e.m. vrijdag tussen 8 en 16.30 uur

Algemeen inwendige ziekten

- 03 380 24 80
- 7 dagen op 7, gedurende 24 uur

Neem ook zeker een kijkje op onze website www.azvoorkempen.be.
Je vindt er o.a. meer praktische informatie terug. Ook voor financiële informatie kan je hier terecht.

10. Persoonlijke notities

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



